



E-Move

FR

2021



Personnalisable selon les besoins de l'utilisateur

QU'EST-CE QUE J'OBTIENS QUAND JE COMMANDE UN E-MOVE?

- 2 roues motorisées en diamètre 20", 22", 24", 25" ou 26"
- 2 mains courantes en acier inoxydable
- 2 pneus gonflés lignés avec insert
- 1 bouton on/off à droite
- 1 batterie NiMH et son chargeur
- 1 sac pour ranger la batterie sous l'assise ou derrière le dossier
- Le manuel d'utilisation
- Garantie 2 ans



Oxeedream

N'hésitez pas à nous
contacter au
03.22.23.24.04 ou par mail
contact@oxeedream.com



NOTE: Les images peuvent montrer des options non incluses dans la configuration standard.

PROFITEZ DE PLUS DE LIBERTE ET D'AUTONOMIE grâce à la motorisation électrique E-Move. Le logiciel de programmation de l'E-Move permet de régler de nombreux paramètres. Vous pouvez ainsi corriger un éventuel déséquilibre de la force musculaire au niveau des bras, obtenir une assistance dans les virages ou au contraire faciliter le maintien de la conduite en ligne droite, et bien plus encore. Vos réglages spécifiques peuvent être sauvegardés et envoyés au fabricant Decon afin que votre E-Move soit livré avec vos paramétrages. La sécurité est toujours la priorité de Decon. Ainsi, tous les paramètres de la roue droite sont sauvegardés dans la roue gauche et inversement. Le paramétrage est à la fois précis et facile à réaliser, afin de s'adapter aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Avec l'E-Move, vous bénéficiez d'un produit fiable, facile à utiliser et personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des différentes options !

■ DONNEES TECHNIQUES

Moteur	AC servomoteur, 24V 2 x 110W
Batterie	NiMH, 24 V, 6.7 Ah, (160.8 Wh) Li-ion, 25 V, 11.8 Ah (295 Wh)
Poids d'une roue	7 kg
Poids total	Avec batterie NiMH : 17 kg Avec batterie Li-ion : 18 kg
Augmentation en largeur du fauteuil	Maximum 1.8 cm/côté
Diamètres des roues	20", 22", 24", 25" ou 26"
Pression des pneus	6 Bar, 600 kPa
Vitesse	0-6 km/h
Autonomie maximale avec batterie chargée à 100%	Approx. 20 km avec NiMH, Approx. 35 km avec Li-ion, conformément aux exigences de la norme ISO 7176-4
Fusible	30A
Capacité de charge maximale	130 kg
Capacité de charge max. "Heavy duty"	150 kg
Pente maximale	6 degrés
Chargeur de batterie	100 à 240V AC, 50/60Hz
Puissance	37V 26A (pendant la charge)
Temps de charge	Approx. 2-3 hours

■ PROGRAMMATION

- Puissance en marche avant et marche arrière
- Sensibilité lors des virages
- Niveau d'assistance à gauche et à droite
- Vitesse limite
- Distance en roue libre
- Compensation dans les dévers

MAINS COURANTES



*Acier
inoxydable

Poly
Compact



Poly Gel

Max Grip

Profils



Rond

AUTRES PNEUS EN OPTION



Pneu ligné



Pneu marathon



Bandage

*Pneu ligné, largeur 1" + insert

Pneu marathon plus 24", largeur 1"

Bandage (20", 22", 24", 26"), largeur 1"

Bandage 24", largeur 1 3/8"

AUTRES OPTIONS

Heavy-duty

Capacité de charge maximale : 150kg.

La jante et les rayons sont dans un matériau plus résistant.

VTT

Modèle tout terrain, seulement en 24"

Bouton 2ème mode de conduite

Ce bouton en option permet de choisir entre 2 modes de conduite paramétrés selon les besoins de l'utilisateur (ex. : intérieur/extérieur, actif/moins actif)

Câble flexible

Bouton Marche/Arrêt, câble flexible, longueur 150mm

Bouton 2ème mode de conduite, câble flexible, longueur 150mm

Bouton Marche/Arrêt, câble flexible, longueur 210mm

Bouton 2ème mode de conduite, câble flexible, longueur 210mm



Flasques (du 20" au 26")

Protégez vos doigts des blessures

Batterie et chargeur supplémentaire

Batterie supplémentaire NiMH, 24V 6,7A.h

Batterie supplémentaire Li-ion, 25V 11,8A.h

Chargeur de batterie

Convertisseur

Convertisseur 230V AC 50Hz 150W

POSITION DE LA BATTERIE

Selon le modèle du fauteuil roulant, la batterie peut être placée uniquement sous l'assise, uniquement derrière le dossier ou sous l'assise et derrière le dossier.

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les possibilités de positionnement de la batterie.



Derrière le
dossier



Sous l'assise


* = Configuration standard



Oxeedream

38 rue René Dinguon 80100 Abbeville

Tel. : 03.22.23.24.04 E-mail : contact@oxeedream.com www.oxeedream.com

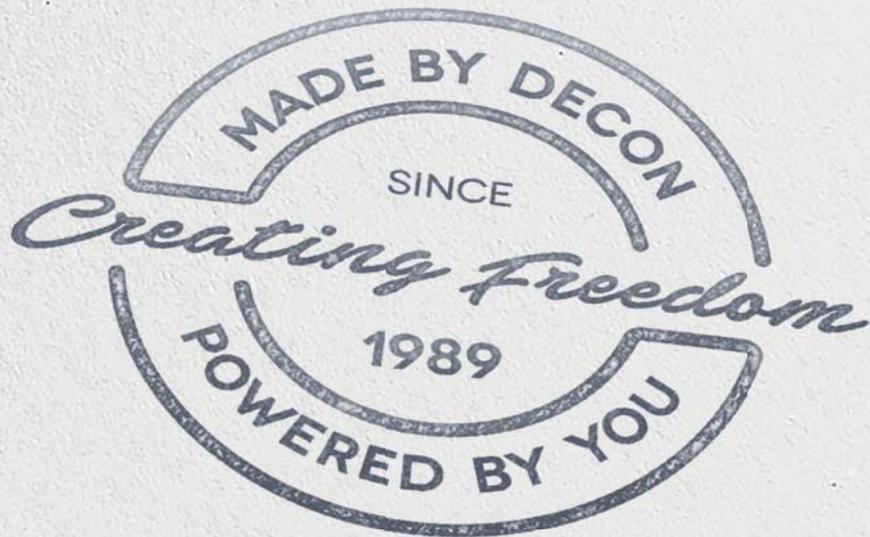

 **decon**

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 Fax: +46 (0)345 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon® is not responsible for any changes made after printing.

© All rights are reserved for Decon®. With reservation for printing and typographical errors, discontinued products and misleading images.